



MyFILLER

NEW LIFE TO THE SKIN



MyMED

Vendel utca, 11
1096 Budapest - Hungary
Tel. +36 1 613 0045

www.my-med.eu
info@my-med.eu



HYALURONİK ASİT NEDİR?

HYALÜRONİK ASİT

Hyaluronik asit, bağ, epitel ve sinir dokularında dağılmış, anyonik, sülfatsız bir glikozaminoglik. Glikozaminoglik ve sülfat içermeyen formları, plazma membranında milyonlarca partikül ağırlığı ile kendini gösterdiği için benzersizdir.

Hyaluronik asit epidermis, derma ve kıkırdak gibi vücudun birçok dokusunda bulunur. Her hücrenin etrafında bir kaplama olarak bulunduğu ve esnekliğinden (kompresyona direnç) sorumlu olduğu için eklem kıkırdağının önemli bir bileşenidir. Aynı zamanda doku koruma, direnç ve onarımda yer aldığı epidermis ve dermanın önemli bir bileşenidir. Cilt aşırı UVB ışınlarına, dumana, kirliliğe maruz kaldığında ve doğal yaşlanma sürecinde özellikle yaşlanma ile birlikte ciltteki hücreler kadar hyaluronan üretmeyi durdurur, bozulma oranını artırır.

Hyaluronik asit, diz osteoartritini eklem içine enjekte ederek tedavi etmeye çalışmak için tıp alanında kullanılmıştır. Ayrıca göz cerrahisinde (kornea nakli, katarakt cerrahisi, glokom cerrahisi ve retina dekolmanını onarmak için cerrahi) kullanım için onaylanmıştır.


Bu nedenle hyaluronik asidin kıkırdak, derma ve epidermis üzerindeki biyomedikal uygulamalara çok uygun olduğunu; optimum sonuçlar, biyoyumlu materyal, hızlı ve rahat bir prosedür ve kalıcı olmayan etki ile güvenli olduğunu varsayabiliriz.

ÇAPRAZ BAĞLANTI

Doğrusal (lineer) hyaluronik asit vücuda enjekte edildikten sonra nispeten kısa bir ömre sahiptir. Medikal uygulamalardan sonra hyaluronik asit zincirinin uzunluğunu uzatmak ve molekülü daha uzun sonuçlar için stabilize etmek amacıyla özel üretim teknikleri geliştirilmiştir.

Çözeltiye, çapraz bağlanan hyaluronik asidi oluşturan bir protein eklenmiştir.

Hyaluronik asidin bozunması çok daha yavaş hale geldi ve enjekte edildikten sonra elde edilen sonuçlar lineer (doğrusal) versiyon ile karşılaştırıldığında kesinlikle daha uzundu.

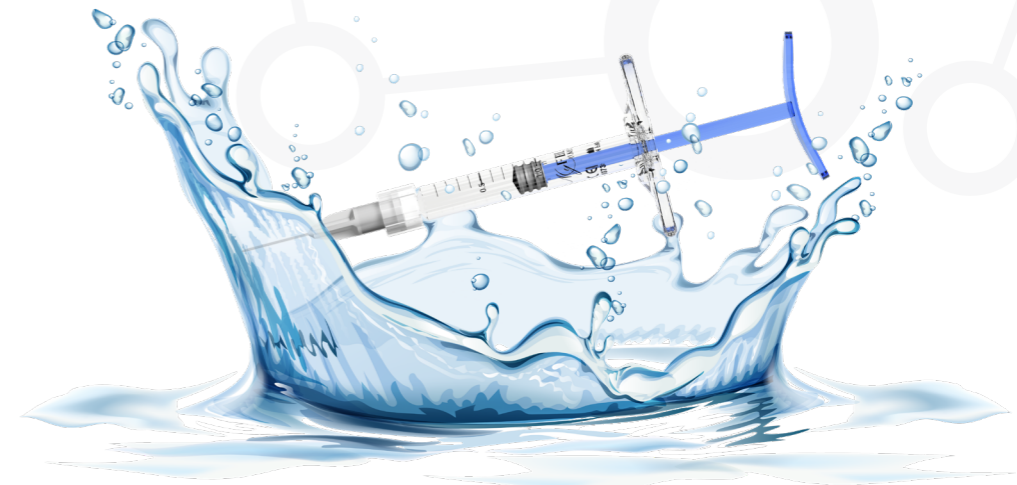

ESTETİK UYGULAMA

CİLDE YENİ HAYAT

Çapraz bağlı hyaluronik asit, enjekte edildiği yerde genişleyen binlerce su molekülü, cilt çöküntüleri, kırışıklıklar ve yara izleri ile birleşir. Aynı zamanda uygulama çevresindeki hücreleri nemlendirerek hastaya parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. **My Filler**, enjeksiyondan sonra hyaluronik asidin üstün performansını sağlayan çapraz bağlama teknolojisine sahiptir, bu da uzun ömür ve nem tutma sağlar.

My Filler'in bir diğer önemli özelliği de ürün akışkanlığıdır. **My Filler**'in enjekte edilmesi diğer dolgu maddelerine göre pürüzsüz ve rahattır.

Benzersiz bir piston şekline sahip mavi / şeffaf kişiselleştirilmiş şırınga, operatör için mükemmel bir kavrama, güvenlik ve kolay kullanım ve dolayısıyla hasta için rahat bir prosedür sağlar.

İstenilen şekli aldığı ve yerinde kaldığı için standart post prosedür masajı ile tıp uzmanları tarafından kalıplanabildiği için **My Filler**'in enjeksiyondan hemen sonraki harika plastik özelliğinden bahsetmek de çok önemlidir.


FORMÜLASYON

İtalya'da en modern laboratuvar ve araştırma merkezlerinden birinde, yüksek nitelikli bir ekip tarafından özel olarak yaratılan ve geliştirilen **My Filler**, kirlilik kalıntılarının pratikte bulunmadığı çok güvenli ve güvenli bir çapraz bağlantı protokolü kullanır. Tüm üretim aşamaları, saf bir nihai ürünü garanti eden steril bir ortamda (steril oda) yapılır.

My Filler bileşimi, farklı viskozite çözeltilerinde ve farklı hyaluronik asit konsantrasyonlarında özel olarak seçilmiş HA moleküler ağırlıklı partiküllerden oluşur. Bunun gibi karmaşık bir formülasyon, tüm olası ve istenen estetik klinik yüz tedavisini kapsar.

My Filler'in sonuçları harika !!!!


- Uygulama alanında uzun ömürlü
- Büyük hidrofilik kapasite
- Cerrahi alanda şekil verilebilme
- Operasyon sonrası stabilite

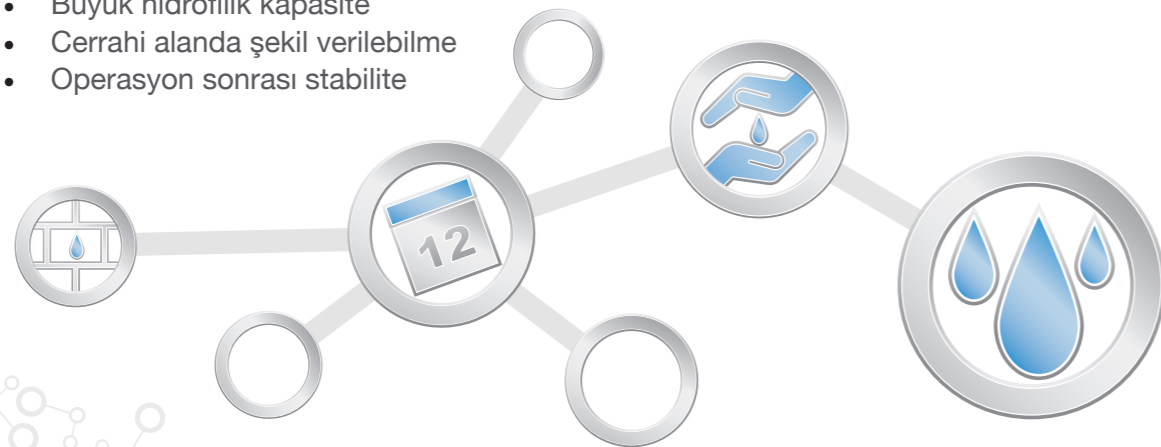


STRONG

MEDIUM

SOFT

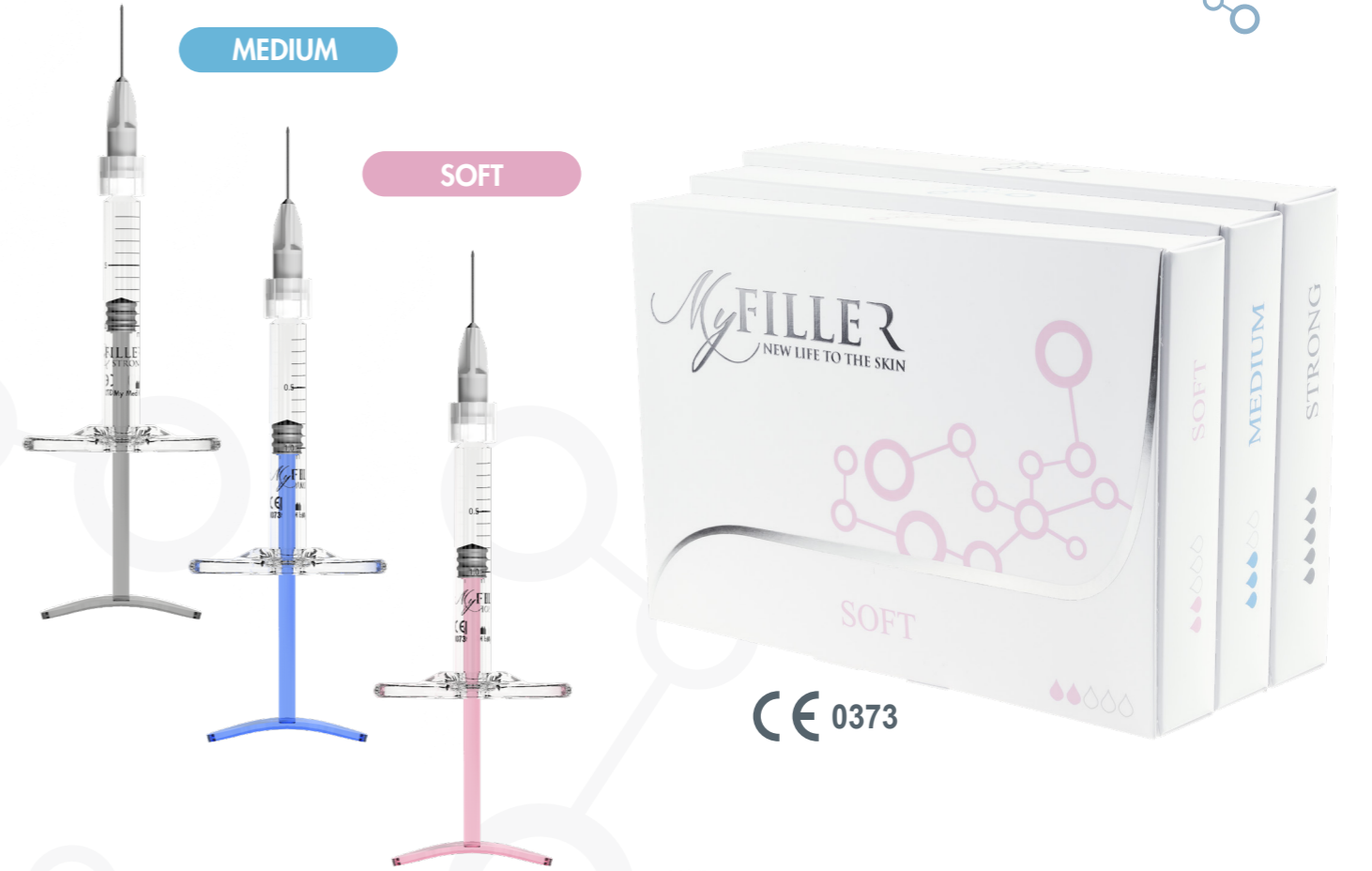

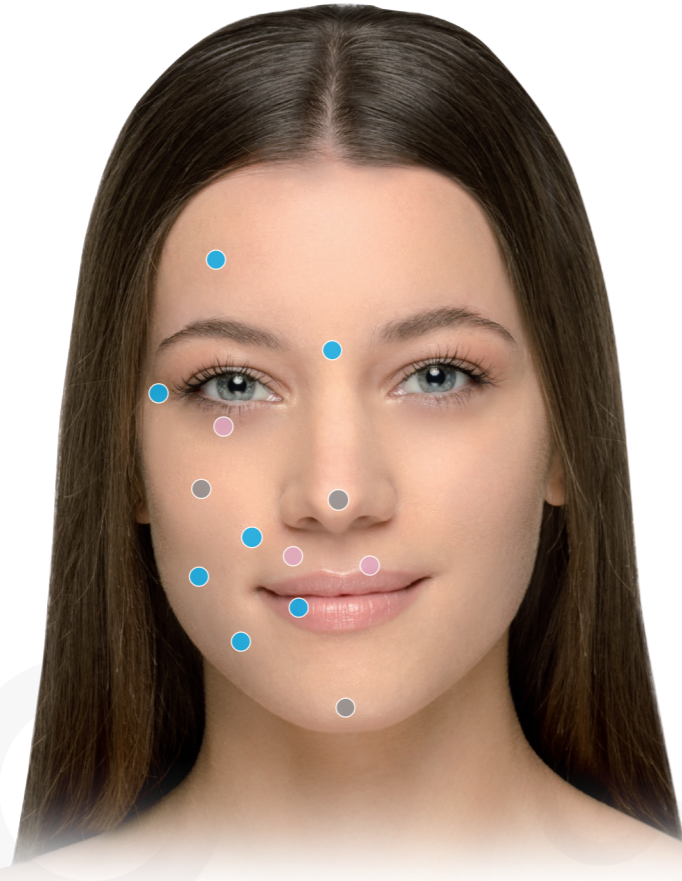

PAKET

My Filler paket içeriği:

- 1 adet steril, hazır dolum şırınga 1 ml
- 2 iğne, 27G
- 2 ürün etiketi
- Çok dilli kullanım talimatı
- Hasta Kartı



	SOFT	MEDIUM	STRONG
Kod	MYF001	MYF002	MYF003
HA Konsantrasyonu	20 mg/ml	25 mg/ml	30 mg/ml
Hacim	1 ml'lik 1 şırınga	1 ml'lik 1 şırınga	1 ml'lik 1 şırınga
İğne	2 adet 27G 1/2 "iğne	2 adet 27G 1/2 "iğne	2 adet 27G 1/2 "iğne
Çapraz-bağ oranı	1,5	2,5	3,5
Partikül Boyutu	80	100	140
Gösterge alanı	Yüzey Derma	Orta Derma	Alt Derma
Uygulama süresi	6-9 ay	6-9 ay	9-12 ay
Son kullanma süresi	30 ay	30 ay	30 ay



EĞİTİM VE ÖĞRETİM

My Filler, estetik alanında uzmanlaşan tıp uzmanlarına özel ilgi gösterir ve doğru eğitimin başarılı olması, tıp uzmanlarının prosedürlerine güven duyması ve daha karmaşık çözümler arayarak tekniklerini geliştirmesi için çalışmaktadır.

Kanül enjeksiyonuna kadar ilk adımlar olarak cilt anatomisi, cilt yaşlanması, yaşlanma karşıtı çözümler, enjeksiyon teknikleri, ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirme, endikasyon ve kontrendikasyonların temel kavramlarının öğretilmesi ve tüm yüzün yeniden şekillendirilmesi ileri düzeydeki konulardan bazılarıdır.

My Filler 2 farklı çözüm sunar: **My Filler E-egitim** ve **My Filler Eğitim Merkezi**.

E-EĞİTİM

E-öğrenme, profesyonel eğitimde küresel bir kullanıma dönüşmüştür. **My Filler E-training**, tıp uzmanlarına ve bilgilerini geliştirmek isteyen tüm sağlık profesyonellerine adanmış en yeni tıbbi e-öğrenme platformudur. E-egitim kullanıcıları kursları, videoları, sunumları anında, her yerde ve her zaman takip edebilir.

My Filler E eğitim platformu, her ülkede **My Med** ortakları tarafından sunulmaktadır. Kullanılabilirliği ve malzeme içeriği yalnızca yerel ortakların sorumluluğundadır.



UYGULAMALI KURSLAR

Budapeşte'nin kalbinde yer alan **My Filler** özel eğitim merkezi, teorik ve pratik uygulamalı kurslar düzenlemektedir. Merkez, en iyi cihazlarla donatılmıştır ve becerilerini geliştirmek isteyen tıp uzmanlarına her zaman ev sahipliği yapmaya hazırdır. Kursun içeriği, katılımcının önceki deneyimine göre ayarlanacak ve estetik alanda geniş deneyime sahip yüksek nitelikli profesyoneller tarafından verilecektir.



BUDAPEŞTE, MACARISTAN - 2022'DE AÇILIYOR

PAZARLAMA ARAÇLARI

Kurs Sertifikası (MYF050)



Klinik Plakası (MYF051)



Roll Up (MYF054)



Klinik Posteri (MYF052)



Mini Roll Up (MYF053)



MOBİL UYGULAMA

My Filler App PRO, ameliyat sonrası tüm önerilerle birlikte tedavilerden “Önce” ve “Sonra” hasta fotoğraflarının fotoğraflarını çekmenize olanak tanır.

Tüm hasta bilgilerinizi kaydeden, hastaların ileri uygulama zamanı geldiğinde hatırlatıcılar sunan, hastalarınıza hızlı bir şekilde fotoğraflar gönderen, kullanımı kolay bir Uygulama.

Mobil Uygulamadan, hasta sayım formları kolayca yazdırılabilir.

MyFILLER
APP Pro

